


Periotom

Gebrauchsanweisung

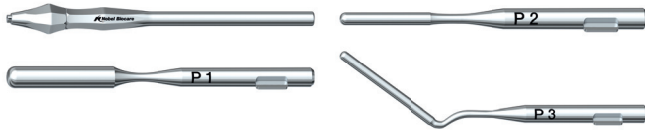

Wichtig: Bitte lesen.

Haftungsausschluss:

Dieses Produkt ist Bestandteil eines umfassenden Behandlungskonzepts und darf ausschließlich in Kombination mit den zugehörigen Originalprodukten gemäß den Anweisungen und Empfehlungen von Nobel Biocare verwendet werden. Durch die nicht empfohlene Verwendung von Produkten von Fremdanbietern in Kombination mit Produkten von Nobel Biocare erlischt die Garantie, und andere ausdrückliche oder konkludente Verpflichtungen von Nobel Biocare werden nichtig. Der Anwender von Produkten von Nobel Biocare muss feststellen, ob das Produkt für einen bestimmten Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet ist. Nobel Biocare übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für direkte oder mittelbare Schäden, Strafe einschließenden Schadensersatz oder sonstige Schäden, die durch oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung von Nobel Biocare Produkten auftreten. Der Anwender ist außerdem verpflichtet, sich regelmäßig über die neuesten Weiterentwicklungen in Bezug auf dieses Nobel Biocare Produkt und seine Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist Nobel Biocare zu kontaktieren. Da die Nutzung des Produkts der Kontrolle des Anwenders obliegt, übernimmt dieser die Verantwortung. Nobel Biocare übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aus der Verwendung des Produkts. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass einige Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, unter Umständen nicht in allen Märkten lizenziert bzw. für den Verkauf zugelassen sind.

Beschreibung:

Das Periotom ist ein wiederverwendbares Instrument in Klingenform, das zur leichteren Entfernung von Zähnen bei minimalen Schäden am umgebenden Alveolarknochen verwendet wird. Das Periotom ist in drei verschiedenen Klingenausführungen erhältlich, je nach Form des Zahns (P1 bis P3). Die Klinge werden mit einem Handstück verbunden.

Verwendungszweck:

Das Periotom kann im Verlauf einer atraumatischen Extraktion verwendet werden, insbesondere bei der Präparation für eine Sofortimplantation.

Es kann zur kontrollierten Trennung der parodontalen Fasern um die Wurzel des zu extrahierenden Zahns herum verwendet werden. Das Instrument kann außerdem zum Zurückklappen des marginalen Zahnfleisches nach der Zahnextraktion verwendet werden, während das Implantatbett präpariert wird.

Indikationen:

Dieses Instrument wird verwendet, wenn Zähne nicht mehr erhalten werden können und extrahiert werden müssen sowie in Fällen, in denen eine atraumatische Zahnfleischabtrennung indiziert ist.

Kontraindikationen:

Unter folgenden Umständen ist die Verwendung kontraindiziert:

- Die gesundheitlichen Voraussetzungen für einen oralchirurgischen Eingriff sind nicht erfüllt.
- Es besteht eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegen handelsüblichen chirurgischen Stahl.

Warnungen:

Das Periotom sollte nicht für ankylosierte Zähne oder zur Anhebung von Wurzelspitzen verwendet werden.

Achtung:

Die Pflege und Wartung von Instrumenten ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Die Sterilisation der Instrumente schützt nicht nur Patienten und Mitarbeiter vor Infektionen, sondern ist auch ausschlaggebend für das Ergebnis des gesamten Eingriffs.

Alle beim Eingriff verwendeten Instrumente und Geräte müssen sich in einem guten Zustand befinden, und es muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu Beschädigungen der Implantate oder anderer Komponenten durch das Instrumentarium kommt.

Aufgrund der geringen Größe der Komponenten ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht vom Patienten verschluckt oder aspiriert werden.

Wir empfehlen allen Zahnärzten – sowohl Neueinsteigern als auch erfahrenen Implantologen – nachdrücklich, an einer speziellen Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode anwenden. Nobel Biocare stellt ein vielseitiges Schulungsangebot für jeden Kenntnisstand zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.nobelbiocare.com.

Durch die anfängliche Zusammenarbeit mit einem Kollegen, der bereits mit dem neuen Produkt/der neuen Behandlungsmethode vertraut ist, lassen sich eventuelle Komplikationen vermeiden. Nobel Biocare bietet zu diesem Zweck ein globales Mentorennetzwerk.

Un sachgemäße Verwendung des Instruments kann zum Bruch der Klinge führen.

Gebrauchshinweise:

1. Die Spitze des Handstücks halten und die Klinge durch Drehen des Handstücks entgegen dem Uhrzeigersinn einsetzen. Die Klinge in die Spitze des Handstücks schieben. Der Klingenschaft verfügt über eine Führung, die im Handstück in einen Schlitz eingreift, um eine Rotation zu verhindern. Durch Drehen des Handstücks im Uhrzeigersinn festziehen.
2. Das Periotom mit sanftem Druck in den parodontalen Raum des zu extrahierenden Zahns einführen. Die Klinge in kontinuierlicher Auf- und Abbewegung um die Wurzel des Zahns herumbewegen, um die parodontalen Fasern zu trennen. Der Zahn kann anschließend unter Anwendung der üblichen chirurgischen Vorgehensweise entfernt werden.
3. Um das Zahnfleisch nach der Extraktion zu mobilisieren, das Periotom subperiostal einführen und das Gewebe vom Knochen heben. Das marginale Zahnfleisch kann dann zurückgeklappt werden, während das Implantatbett präpariert wird.

Weitere Informationen zur Präparation des Implantatbetts finden Sie im Handbuch für das entsprechende Implantatsystem unter www.nobelbiocare.com. Eine aktuelle Druckausgabe erhalten Sie von Ihrem Nobel Biocare Ansprechpartner.

Materialien:

Klinge und Handstück: Chirurgischer Stahl.

Anweisungen zum Reinigen und Sterilisieren:

Das Produkt wird unsteril und für den mehrmaligen Gebrauch geliefert und muss vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert werden. Die Spitze des Handstücks und das Handstück vor dem Reinigen zerlegen.

Nur für USA: Das Produkt kann einzeln in einem verschlossenen Beutel mit Dampf drei Minuten lang bei 132°C (270°F) sterilisiert werden.

Außerhalb der USA: Das Produkt kann einzeln in einem verschlossenen Beutel mit Dampf drei Minuten lang bei 132°C–135°C (270°F–275°F) sterilisiert werden.

Alternativ für GB: Das Produkt kann einzeln in einem verschlossenen Beutel mit Dampf drei Minuten lang bei 134°C–135°C (273°F–275°F) sterilisiert werden.

Sämtliche empfohlenen Parameter finden Sie in den „Richtlinien zur Reinigung und Sterilisation einschließlich MRT-Information für Nobel Biocare Produkte“ auf der Website von Nobel Biocare unter www.nobelbiocare.com/sterilization. Eine aktuelle Druckausgabe erhalten Sie von Ihrem Nobel Biocare Ansprechpartner.

Warnung: Die Verwendung unsteriler Komponenten kann zu Gewebeeinfektionen oder ansteckenden Krankheiten führen.

Informationen zur MRT-Sicherheit:

Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht auf Sicherheit und Kompatibilität bei MRT-Untersuchungen getestet wurde. Es erfolgten keine Tests des Produkts im Hinblick auf Erwärmung oder Migration bei MRT-Untersuchungen.

Handhabung und Lagerung:

Die Lagerung des Produkts muss an einem trockenen Ort in der Originalverpackung bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung erfolgen. Unsachgemäße Lagerung kann die Produkteigenschaften beeinflussen und zum Versagen führen.

Entsorgung:

Die Entsorgung des Produkts muss gemäß den lokal geltenden Bestimmungen und Umweltvorschriften erfolgen, wobei der jeweilige Kontaminationsgrad berücksichtigt werden muss.



Hersteller: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26

Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Schweden.

Tel.: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com



Nicht steril



Achtung



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargen-Code

DE Alle Rechte vorbehalten.

Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen in diesem Dokument vorkommenden Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Die Produktabbildungen in dieser Anleitung sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu.