


Periotome

Használati útmutató

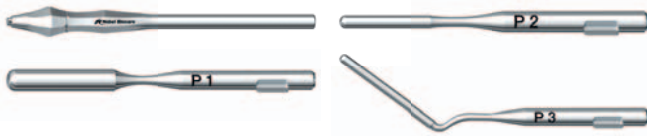

Fontos: Kérjük, olvassa el!

Felelősségi nyilatkozat:

Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a beteg kezelésére. A Nobel Biocare elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. Mivel a termék használata a felhasználó belátása szerint történik, a használat a felhasználó felelősségére történik. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkért. Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás:

A Periotome egy többször használható, pengével rendelkező eszköz, amely a fog eltávolítására használható a környező alveoláris csont minimális károsodása mellett. A Periotome három pengekonfigurációval vásárolható meg, a használandó penge a fog formájától függ (P1–P3 ábra). A pengéket a markolathoz kell csatlakoztatni.

Rendeltetés:

A Periotome atraumatikus fogeltávolítás során használható főként közvetlenül egy implantátum beültetése előtt.

A Periotome az eltávolítandó fog gyökere környéki periodontális szövetek szétválasztására is használható. A fog eltávolítása után az eszköz a fogíny szélének visszahajtására is használható a beültetés helyének előkészítése során.

Javallatok:

Ez az eszköz a nem helyreállítható fogak eltávolítására és a fogíny atraumatikus szétválasztására használható.

Ellenjavallatok:

Általában az ellenjavallatok az implantátumok beültetésével kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak olyan betegek esetében, akik:

- belgyógyászati szempontból nem alkalmasak szájsebészeti műtétre;
- allergiások vagy túlérzékenyek a kereskedelmi minőségű rozsdamentes acélra.

Vigyázat:

A Periotome nem használható fogmederrel összezsugorodott fog esetében, valamint a gyökércsúcs felemelésére.

Figyelmeztetések:

Az eszközök gondos kezelése és karbantartása elengedhetetlen a kezelés sikerességéhez. A sterilizált eszközök használata nemcsak a betegeket és a személyzetet segít megvédeni a fertőzésektől, hanem az egész kezelés sikerességéhez is szükséges.

A műtét során használt összes eszközt jó állapotban kell tartani, és figyelni kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy más összetevőket.

Az eszközök kicsiny mérete miatt ügyelni kell arra, hogy ezeket a beteg ne nyelje le, és ne lélegezze be.

Kifejezetten javasolt minden orvosnak, az implantátumok alkalmazásában tapasztalt és az abban nem jártas szakembereknek is, hogy minden új kezelési módszer alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare többféle tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalatszinten lévő szakemberek képzésére. További tudnivalóért keresse fel a www.nobelbiocare.com webhelyet.

Amikor először alkalmaz egy új eszközt vagy kezelési módszert, az esetleges szövődmények elkerülése érdekében segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával együtt dolgozik. A Nobel Biocare erre a feladatra kiképzett mentorai a világ minden részén rendelkezésre állnak.

Az eszköz helytelen használata a pengéjének törését okozhatja.

Használat:

1. Csatlakoztassa a pengét a markolathoz úgy, hogy megtartsa a markolat végét, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a markolatot. Csúsztassa a pengét a markolat végébe. A penge szárán rovátka található, amely bemelegíti a markolatban kialakított helyre, így megakadályozva a penge elfordulását. Szorítsa meg úgy, hogy a markolatot az óramutató járásával meggyező irányba forgatja.
2. Lassan, de kellő erővel nyomja a Periotome pengéjét az eltávolítandó fog körüli részbe. „Járja körül” a fogat a pengével, közben fel és le irányba mozgatva a pengét, így szétválasztva vele a periodontális szöveteket. Ezután a fog a szokott műtéti eljárásokkal távolítható el.
3. A fogíny kiszabadításához a foghúzás után vezesse be a Periotome eszközt szubperiostálisan, és emelje fel a szövetet a csonttól. Ezután visszahajtható a fogíny széle a beültetés helyének előkészítése során.

A beültetési hely előkészítésére vonatkozó további információkat a megfelelő implantátumrendszer kezelési útmutatójában talál, amelyet a www.nobelbiocare.com webhelyről tölthet le, vagy kérje a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől.

Anyagok:

Penge és markolat: sebészeti tisztaságú rozsdamentes acél.

Tisztítási és sterilizálási utasítások:

Az eszközöket nem sterilén szállítjuk. Az eszközök többször használhatók, használat előtt tisztítani és sterilizálni kell őket. A tisztítás előtt szedje szét a markolat végét és a markolatot.

Az Amerikai Egyesült Államokban: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 132 °C (270 °F) hőmérsékleten 3 percen keresztül.

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 132–135 °C hőmérsékleten 3 percen keresztül.

Másik lehetőség Nagy-Britanniában: Az eszközöket egyenként helyezze zárt tasakba, és végezzen gőzsterilizálást 134–135 °C hőmérsékleten 3 percen keresztül.

A javasolt paraméterek „A Nobel Biocare termékek tisztítási és sterilizálási útmutatója és az MR-képkalkotásra vonatkozó tájékoztatás” dokumentumban találhatók, amelyet a www.nobelbiocare.com/sterilization oldalon tölthet le, vagy a legújabb nyomtatott változatát a Nobel Biocare képviselőjétől szerezheti be.

Vigyázat: A nem steril alkatrészek felhasználása fertőzést, illetve a fertőzőes betegségek továbbadását okozhatja.

Az MR-képkalkotásra vonatkozó biztonsági tájékoztatás:

Nem a terméket vizsgálják biztonság és kompatibilitás tekintetében MR-környezetben. Nem vizsgálták a termék melegedését és elmozdulását MR-környezetben.

Tárolás és kezelés:

A terméket száraz helyen kell tárolni, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve. A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

Kiselejtezés:

A termék kiselejtezését a helyi előírások és a környezetvédelmi szabályok betartásával kell végezni, figyelembe véve a szennyezettség fokát.

Gyártó: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svédország.
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com



Szavatossági idő



Tételszám

HU Minden jog fenntartva.

A Nobel Biocare, a Nobel Biocare embléma és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb márkanév a Nobel Biocare tulajdonát képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs feltüntetve, és a szövegtörzsből nem derül ki. Az ezen a lapon található képek nem feltétlenül méretarányosak.